

Универсальный подъёмник для инвалидов-колясочников - «MINIK»



Индивидуальное переносное устройство для инвалидов и маломобильных больных

Может применяться для самостоятельного (или при помощи другого лица) пересаживания инвалида-колясочника в стандартное кресло любого автомобиля, на диван, кровать, туалет или в ванну, а также, в сочетании с податной тележкой и дополнительными комплектующими, может использоваться как вертикализатор. **Незаменим для малогабаритных квартир.** Позволяет пересадить больного человека в ванную или на туалет без заезда инвалидного кресла в узкие дверные проёмы. Не портит интерьер.

«MINIK» - самый маленький инвалидный подъёмник в России, и единственный для

пересаживания инвалида в автомобиль.

Преимущества: компактность, универсальность, мобильность.

Технические характеристики:

1. Вес изделия – 10 кг.
2. Габариты в сложенном виде 560x330x140 мм
3. Длина подъёмника в рабочем состоянии 85 см (при использовании поворотной калитки-удлинителя длина увеличивается на 45 см)
4. Поднимаемый вес человека – до 150 кг. (под заказ до 200кг)
5. Высота подъёма до 65 см (под заказ до 85 см)
6. Тип привода – электро-механический (производитель компания LINAК (ДАНИЯ))
7. Электропитание 12В (от автомобильной розетки прикуривателя, аккумулятора или сетевого адаптера), потребляемая сила тока 10А.
8. Условия эксплуатации - 45 +55 С
9. Система управления – выносной пульт с витым проводом
10. Система крепления – настенные, напольные, автомобильные кронштейны, распорная труба или податная тележка

Страна производитель – Россия

Возможная комплектация

Подъёмник MINIK (тканевый подвес входит в комплект)




Блок питания – миниатюрный гелиевый аккумулятор 12В (вес 700гм) + зарядное устройство – 220В



Настенный кронштейн регулируемый по высоте (высота 1 м, ширина 50 см)

Поворотная калитка-удлинитель длина 45 см . Она применяется там, где есть необходимость удлинить конструкцию и создать дополнительное поворотное звено.

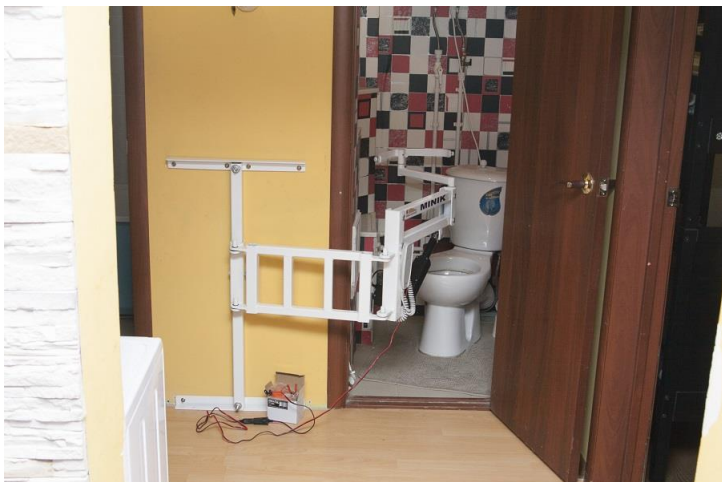

Кронштейн на распорной трубе (выполняется на заказ из двух частей примерно по 1.5 м, устанавливается между полом и потолком при помощи упорной гайки) применяется там, где нет возможности использовать крепление к стене.



Подкатная тележка с раздвижными полозьями превращает MINIK в обычный колёсный подъёмник для перемещения больных. Применяется для поездок на дачу, в гости, курортно-санаторное лечение, т.е. там где нет возможности использовать настенное крепление.

Технические характеристики:

Габариты в сложенном виде

- длина 120 см
- длина 110 см
- ширина при сложенных полозьями 55 см
- ширина при разложенных полозьях 75 см
- высота плозий от уровня пола 13 см

